



Bedside Scale

Model AD-6121ABT1

Instruction Manual

English

Manuel d'instructions

Français

Manual de Instrucciones

Español

Manuale di Istruzioni

Italiano

Bedienungsanleitung

Deutsch

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Manual de Instruções

Português

Brugsvejledning

Dansk

Instruktionsmanual

Svenska

Bruksanvisning

Norsk



Käyttöohje

Suomi



Denne bruksanvisningen og symboler

Alle sikkerhetsmeldinger gjenkjennes ved følgende: ADVARSEL eller FORSIKTIG, av ANSI Z535.4 (American National Standard Institute: Product Safety Signs and Labels). Betydningen er som følger:

 ADVARSEL	En potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig skade, hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	En potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller middels alvorlig skade, hvis den ikke unngås.



Dette er et farevarselsymbol.

- Denne bruksanvisningen kan når som helst endres for å forbedre produktet, uten forutgående varsel.
- Produktspesifikasjonene og innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten at produsenten er forpliktet til å oppdatere tidligere produkter.
- Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.



INNHOLD

1.	HOLDSREGLER	2
1.1.	Sikkerhetsforholdsregler	2
1.2.	Forholdsregler for håndtering	2
2.	INNLEDENDE MERKNADER	3
3.	FUNKSJONER.....	3
4.	DELENAVN OG TILBEHØR.....	4
4.1.	Symboler	5
5.	FØR BRUK	6
5.1.	Klargjøring	6
6.	BRUKE VEKTEN	7
6.1.	Grunnleggende veiing	7
6.2.	Slik virker den trådløse forbindelsen.....	8
7.	VEDLIKEHOLD	9
7.1.	Opprettholde resultat kvaliteten	9
7.2.	Rengjøre vekten	9
7.3.	Oppbevare av vekten	9
8.	FØR DU BER OM REPARASJON	10
9.	SPESIFIKASJONER.....	11
9.1.	Spesifikasjoner	11
9.2.	Ytre mål	11



1. HOLDSREGLER



1.1. Sikkerhetsforholdsregler

FORSIKTIG

- Ikke sett vekten på et mykt, vått eller glatt gulv. Sett vekten på et solid og plant gulv.
- Ikke sett vekten på steder der noen kan snuble i den eller sparke på den.
- Ikke trå på vekten hvis du er våt på føttene.
- Trå forsiktig på den midtre delen av vekten.
- Ikke trå på displayvinduet.
- Bær vekten etter håndtakene, og ikke sving den rundt eller dunk borti noe med den.
- Ikke demonter eller foreta endringer på vekten. Hold vekten fri for fuktighet, støv og fremmedlegemer.
- Vekten må bare repareres av kvalifiserte personer. Forsøker du å reparere den selv, kan det føre til brann eller skade på vekten. Skade som skyldes at du selv har forsøkt å reparere vekten, vil gjøre garantien ugyldig.
- Målingene kan bli forvrengt hvis vekten brukes nær et fjernsynsapparat, en mikrobølgeovn, mobiltelefoner, røntgenstråler eller andre apparater med sterke elektriske felter.
- Brukte deler og batterier skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall. De må kasseres i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



1.2. Forholdsregler for håndtering

1.2.1. Plassering

- Sett vekten på et plant gulv der det ikke er vibrasjoner eller trekk. Gulvet må være solid nok til å bære vekten av vekten og personen som veies.
- Sett vekten et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.
- Sett vekten et sted der den ikke er utsatt for støy utenfra eller sterke elektromagnetiske bølger.
- Ikke sett vekten et sted der det er tærende, brennbare eller eksplosive stoffer.
- Hold temperaturen og fuktigheten på stedet innenfor det angitte området for driftstemperatur og fuktighet.

Forholdsregler for bruk

- Vektens største veiekapasitet er 150 kg. Ikke plasser noe på vekten, som er over veiekapasiteten.
- Stå stille på vekten under veiingen.
- Ikke trykk kraftig på ON/OFF-bryteren eller ZERO-bryteren. Ikke spark på dem.



2. INNLEDENDE MERKNADER

- Denne enheten samsvarer med det lovfestede EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EF. WML-40AH er godkjent i henhold til R&TTE-direktivet som sendermodul merket med **CE**⁰⁶⁷⁸ **!**, produsert av MITSUMI incorporated som OEM-produkt.
- Riktig bruk
Enheden er en vekt til bruk i hjemmet, på sykehus eller klinikker i forbindelse med vektkontroll. Den interne trådløse forbindelsen setter enheten i stand til å kommunisere med en enhet som overvåker brukerens helse.
- Bruksmiljø
Denne enheten er beregnet for innendørs bruk.




3. FUNKSJONER

- AD-6121ABT1 er en kontrollert kompakt, bærbar vekt for lettere veiing.
- Summeren viser veieforholdene.
- Strømforsyningen bruker bare batterier.
- Automatisk avslåingsfunksjon som slår av strømmen etter omtrent 45 sekunders uvirksomhet. Dette hindrer for tidlig batteriutlading.




4. DELENAVN OG TILBEHØR

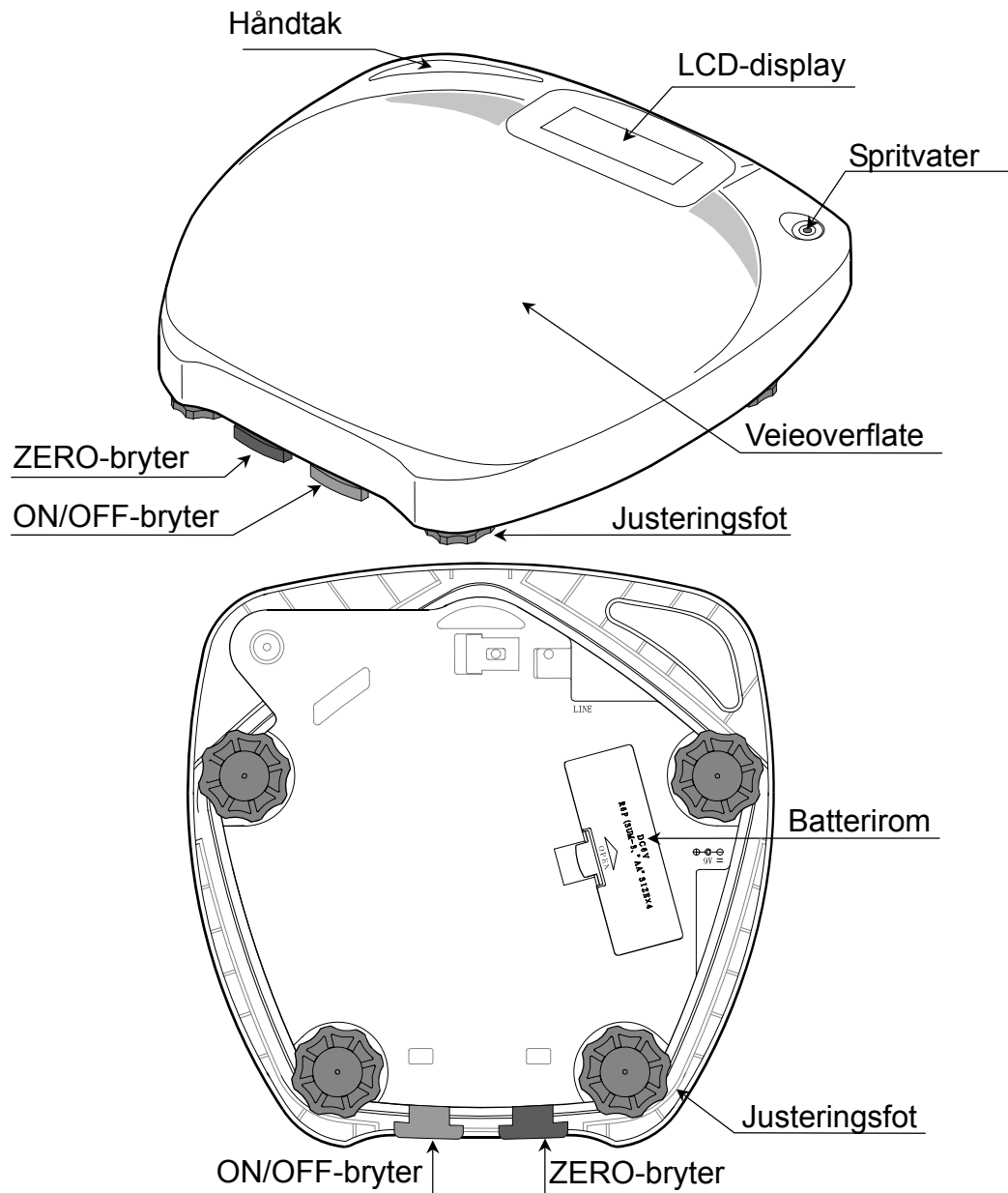

Tilbehør




Bruksanvisning

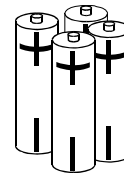

Fire batterier av type LR6



4.1. Symboler

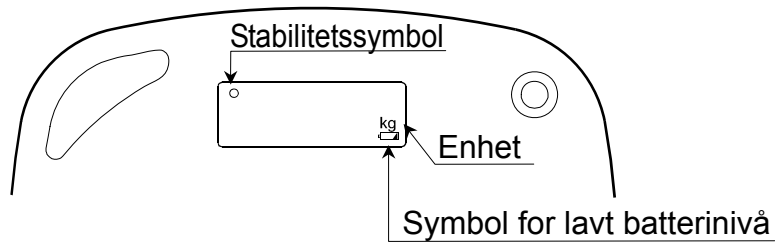

Displaysymboler

Symboler	Beskrivelse
○ Stabilitetssymbol	Dette symbolet vises når den viste vekten er stabil.
⎓ Symbol for lavt batterinivå	Dette symbolet vises når batteriene er utladet. Skift ut batteriene med fire nye batterier av LR6-type.

Brytere

Brytere	Beskrivelse
ⓘ ON/OFF-bryter	Slår på og av vekten.
→0← ZERO-bryter	Når denne bryteren trykkes inn etter at et objekt på 2 kg eller mindre er plassert på vekten, settes den viste vekten til null.

Symboler

Symboler	Funksjon/betydning	Anbefalt handling
ⓘ	Slår på og av enheten	_____
⊕ ⊞ ⊖	Veiledning for innsetting av batteri	_____
— — —	Likestrøm	_____
S/N	Serienummer	_____
2007	Produksjonsdato	_____
	Type B: Vekten er utformet for å gi spesiell beskyttelse mot elektrisk støt.	_____
CE 0678 ⓘ	Merke for R&TTE-direktivet for sendermoduler	_____
	WEEE-symbol	_____
III	Presisjonsklasse	_____




5. FØR BRUK



5.1. Klargjøring

- 1 Bruk de fire alkaliske batteriene av type LR6
- 2 Sett vekten på et solid gulv og juster den med justeringsføttene, slik at boblen i spritvateret blir midtstilt.

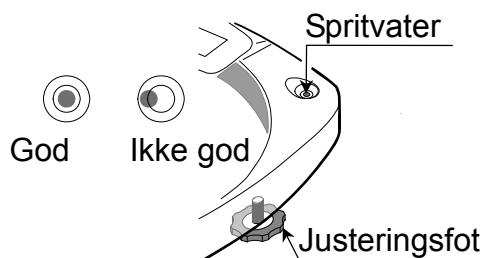


5.1.1. Bruke batteriene

ADVARSEL

- Når du setter i batteriene, må du tilpasse plusspolene (+) og minuspolene (-) med det som er angitt i batterirommet.
- Bruk fire batterier av typen LR6.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ta ut batteriene hvis vekten ikke skal brukes på en god stund. Batteriene kan lekke og forårsake feilfunksjon.
- Hvis du søler batterisyre på vekten, må du straks vaske det bort under rennende vann.

- Når symbolet for lavt batterinivå vises, må du skifte ut batteriene med fire nye batterier av typen LR6.
Husk at symbolet for lavt batterinivå ikke vises når batteriene er helt utladet.

- 1 Ta av dekslet over batterirommet.
- 2 Sett inn fire nye batterier av typen LR6 i batterirommet.
Forsikre deg om at polariteten (+) og (-) er riktig.
- 3 Sett på dekslet over batterirommet.

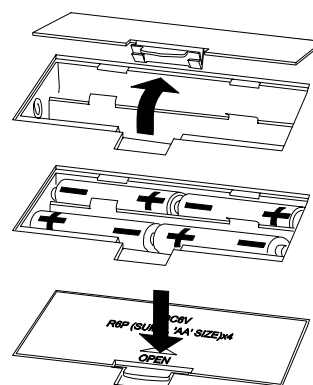




6. BRUKE VEKTEN




6.1. Grunnleggende veiing

- 1 Forsikre deg om at det ikke er plassert noe på vekten.
- 2 Trykk på ON/OFF-bryteren for å slå på vekten. Alle displaysegmenter slås på og deretter vises nuller.
- 3 Trykk på ZERO-bryteren. Hvis den viste verdien ikke er null, trykker du på ZERO-bryteren.
- 4 Gå forsiktig opp på vekten.
- 5 Strek-displayet øker etter hvert som verdien blir stabil.
- 6 Når verdien blir stabil, vises vekten og stabilitetssymbolet \circ slås på.
- 7 Gå forsiktig av vekten.
- 8 Vekten vises i 15 sekunder. Deretter slås vekten av automatisk. Vekten kan også slås av med ON/OFF-bryteren.

Ikke noe på vekten

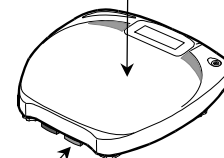


ON/OFF-bryter




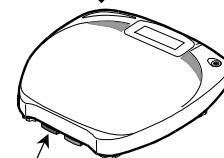


ZERO-bryter

Null-display

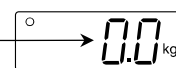


Gå på

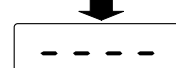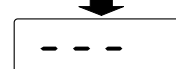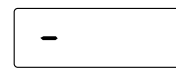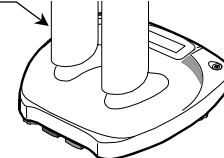

Stabilitets-symbol



Vekt

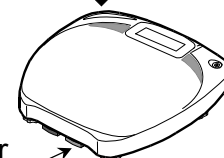

ON/OFF-bryter



6.2. Slik virker den trådløse forbindelsen

Når veiingen er avsluttet, blir vekten sendt automatisk til din helseovervåkingsenhet. Du trenger ikke å foreta deg noe. Hvis helseovervåkingsenheten ikke virker eller er utenfor rekkevidde, lagres vekten i vektminnet (opptil 40 veiinger).



7. VEDLIKEHOLD



7.1. Opprettholde resultat kvaliteten

- Undersøk vekten regelmessig for å forsikre deg om at den veier riktig. Foreta kontroll eller kalibrering om nødvendig.
Det anbefales på generelt grunnlag å få utført en inspeksjon av vekten hvert 2. år, for at alt skal virke som det skal, og med den påkrevde nøyaktigheten.
Opplysninger om kontroll og kalibrering får du hos en A&D-forhandler.



7.2. Rengjøre vekten

- Rengjør vekten med en myk klut som er fuktet med vann, og et mildt vaskemiddel. Etter fuktning må kluten klemmes eller vris opp, slik at den ikke drypper.
- Ikke bruk organiske løsemidler, som for eksempel tynner, bensin eller metanol, ved rengjøring av vekten.
- Ikke bruk et desinfiseringsmiddel, som inneholder klor, ved rengjøring av vekten.
- Ikke utsett vekten for sterk ultrafiolett stråling eller vanddamp med høy temperatur.



7.3. Oppbevare av vekten

- Ved oppbevaring av vekten:
 - Forsikre deg om at det ikke er plassert noe på vekten.
 - Forsikre deg om at ON/OFF-bryteren ikke er trykket inn.
 - Ta ut batteriene.
- Ikke oppbevar vekten:
 - Der den kan bli utsatt for høy temperatur eller høy fuktighet.
 - Der det finnes noe saltholdig, svovel eller etsende gasser.
 - Der det oppbevares kjemikalier.



8. FØR DU BER OM REPARASJON

- Se i tabellen nedenfor før du ber om reparasjon.

Når	Hva skal gjøres
Det vises ingenting i displayet, selv om vekten er slått på.	Undersøk om batteriene er satt riktig i. Undersøk om batteriene er utladet.
[---] forblir i displayet og endres ikke.	Undersøk om det er plassert noe på vekten. Undersøk om noe berører vekten.
Forskjellen mellom antatt vekt og faktisk vekt er stor.	Undersøk om vekten er justert plant. Undersøk om noe berører vekten.
Bryterne virker ikke. Displayet endres ikke jevnt når bryterne trykkes inn.	Ta ut batteriene og sett dem inn på nytt. Slå deretter på vekten.
[E-1] , [E-2] eller [E-4] vises i displayet.	Be om reparasjon.
[E] vises.	Dette feilsymbolet vises når objektet på vekten er over veiekapasiteten. Ta objektet av vekten.
[-E] vises.	Dette feilsymbolet vises når vekten er under 3 kg. Undersøk om noe er plassert på vekten eller om noe berører vekten. Slå deretter vekten av og på igjen.



9. SPESIFIKASJONER




9.1. Spesifikasjoner

Type	AD-6121ABT1
Største veiekapasitet	150 kg
Minste displayvisning	100 g
Minste veiekapasitet	2 kg
Display	LCD
Område for drifts temperatur og fuktighet	+5 °C til +35 °C / 30 % rf til 85 % rf, ikke-kondenserende
Oppbevaringsforhold	-20 °C til +60 °C / 10 % rf til 95 % rf
Strømforsyning	Fire batterier av type LR6
Batteritid	Omtrent 1000 veiinger (varierer med type og omgivelsenes temperatur).
Summer	
Ytre mål	314 (d) x 315 (b) x 57 (h) mm
Vekt	Omtrent 3 kg
Trådløs kommunikasjon	WML-40AH (MITSUMI Electronics Co. Ltd.)



9.2. Ytre mål

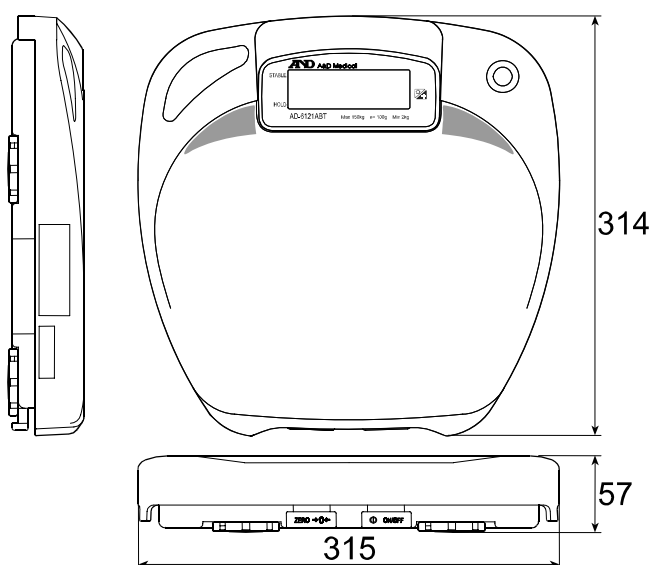

Måleenhet: mm

AND

 **A&D Company, Limited**

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC	REP
----	-----

A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485